

SEPTODONT IGŁY

Mądry wybór

MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE



SEPTOJECT

Ostrość, którą docenisz

- Doskonała penetracja tkanek osiągana dzięki wysokiej jakości igle z potrójnym skosem oraz z polerowaną i silikonowaną kaniulą
- Wykorzystanie wysokiej jakości stali nierdzewnej w celu zmniejszenia ryzyka złamania (ISO 9626)
- Oznaczenie skosu zapewniające kontrolę pozycji igły
- Plastikowa nasadka
- Sterylizacja promieniami gamma



MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE




A NAWET WIĘCEJ...



Każdy lekarz może doświadczyć trudności z penetracją i trajektorią igły, co często jest bezpośrednio związane z bólem odczuwanym przez pacjenta, zarówno w momencie iniekcji, jak i po niej. Przyczyny tych problemów klinicznych można przypisać bardziej samej igle niż technice aplikacji.

W niezależnym badaniu, opublikowanym w 2005^(1,2), wykonano pod mikroskopem elektronowym skany, aby przyjrzeć się siedmiu powszechnie używanym markom jednorazowych igieł stomatologicznych. Ujawniono wady produkcyjne zlokalizowane na końcach igieł, takie jak zadziory oraz postrzępione i tępe krawędzie.

IGŁY INNYCH PRODUCENTÓW

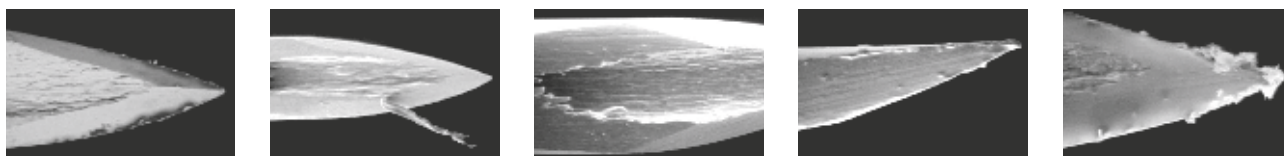

SEPTOJECT

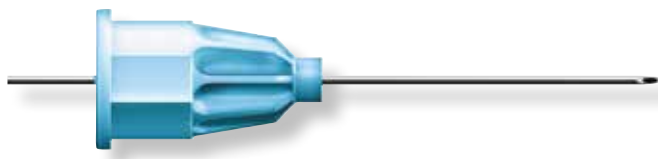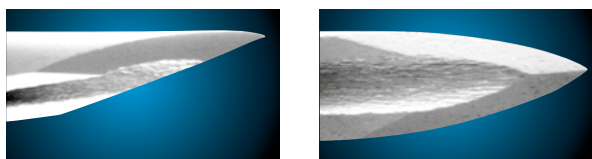

To badanie porównawcze wykazało,
że wśród ocenianych siedmiu znanych marek

„...NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
BYŁY IGŁY FIRMY SEPTODONT”

Dostępne rozmiary:

ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ

30G – 0,30 mm

8, 12, 16, 21, 23, 25 mm

27G – 0,40 mm

16, 21, 25, 35 mm

(1) Microscopic evaluation of dental needles. Diego Espinosa Sanchez and Roberto Espinosa Fernandez. University center of Health Sciences. Guadalajara Mexico. The dental surgeon of France N°1206 du 07 avril 2005.

(2) Assessing dental needles. Diego Espinosa Sanchez and Roberto Espinosa Fernandez. University center of Health Sciences, Guadalajara, Mexico. The DENTIST January 2007.66-68.

MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE



SEPTOJECT EVOLUTION

Większa kontrola, mniejszy dyskomfort

Igła Septoject Evolution została zaprojektowana w celu zapewnienia delikatniejszej penetracji tkanki. Dla pacjenta oznacza to znaczne zmniejszenie dyskomfortu nawet w przypadku wielokrotnych iniekcji. Natomiast dla lekarza dentysty oznacza to stosowanie mniejszej siły, co w połączeniu za znacząco zredukowaną możliwością odchylenia igły, daje w efekcie lepszą kontrolę i precyzję iniekcji.

- Większa kontrola i dokładność dla Ciebie
- Znaczna redukcja dyskomfortu pacjenta
- Oznaczenie skosu i pozycji podczas wkłucia
- Sterylizacja promieniami gamma

OSTRZE IGŁY
W KSZTAŁCIE SKALPELA

ŁATWIEJSZE
WKŁUCIE IGŁY



ZREDUKOWANE
ODCHYLENIA IGŁY



MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE



A NAWET COŚ WIĘCEJ...





ŁATWIEJSZE WKŁUCIE

Łatwa penetracja: Septoject Evolution wymaga o 29% mniej siły do wprowadzenia w tkanki.

Idealna igła do wielokrotnych iniekcji: czwarte wkłucie przy użyciu Septoject Evolution nadal wymaga mniejszej siły niż pierwsze wkłucie wykonane standardową igłą.

Niezbędna siła (w Newtonach) do penetracji 10 mm silikonowego bloczka⁽¹⁾:

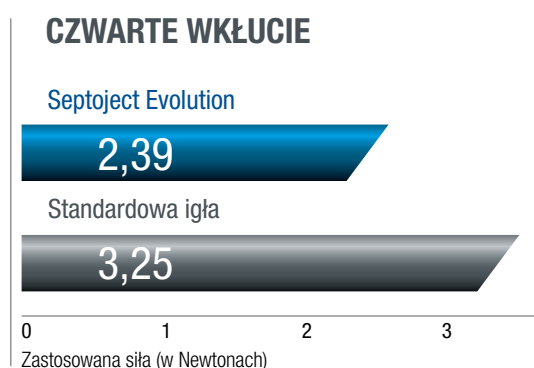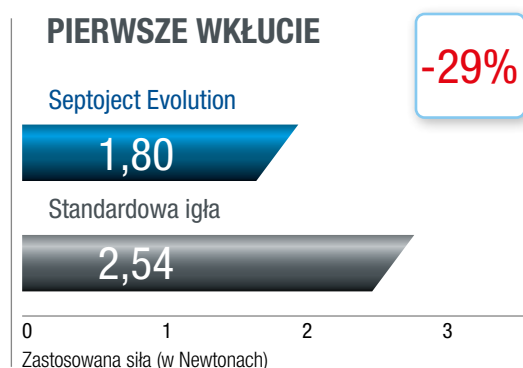

(1) A. Steele et al. Submitted for publication.




ZREDUKOWANE ODCHYLENIE IGŁY


Większa dokładność dzięki znaczącej redukcji odchylenia igły.

Porównanie odchylenia (w mm) igły po penetracji 10 mm silikonowego bloczka⁽²⁾:

Septoject Evolution Standardowa igła

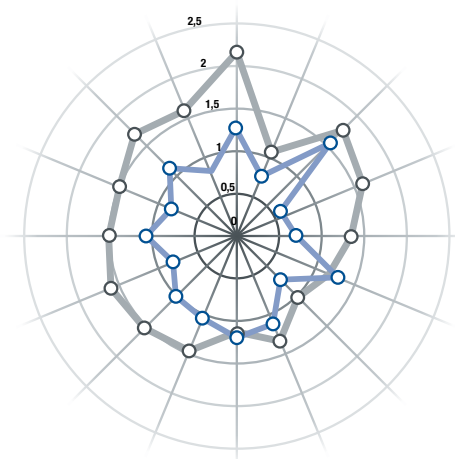

Odległość do celu (w mm).
Im bliżej „0”, tym mniejsze odchylenie.

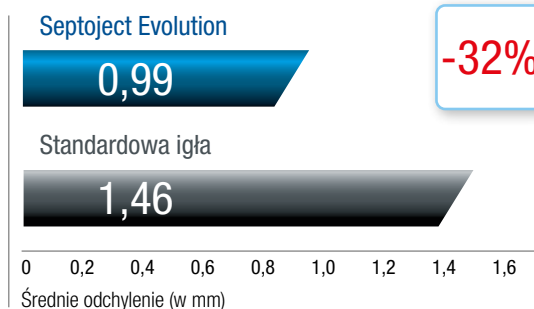

(2) JG Meechan et al. Submitted for publication.

Dostępne rozmiary:

ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
30G – 0,30 mm	9, 16, 25 mm
27G – 0,40 mm	25 mm

MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE





KONTROLA BÓLU W TWOIM GABINECIE

TWOJA IGŁA JEST NA PIERWSZYM PLANIE!

Jako światowy lider w dziedzinie Kontroli Bólu*, rozumiemy, że liczą się pierwsze chwile w relacji lekarz-pacjent... a w wielu przypadkach to właśnie czubek igły jest tym pierwszym kontaktem.

Wybór wysokiej jakości igły daje najlepszą szansę na przekształcenie tego kluczowego momentu w taki, który wzbudza zaufanie.

PACJENCI LECZENI BEZBOLEŚNIE TO... SZCZĘŚLIWI DENTYŚCI!

Ból jest czynnikiem, który wywołuje największy lęk, jaki pacjenci odczuwają w gabinecie stomatologicznym. Pacjent nie odczuwający bólu podczas iniekcji ma większe szanse na to, że będzie zrelaksowany podczas zabiegu, a wtedy można łatwiej go leczyć. Jednak poza komfortem, stawką jest również Twoja reputacja i efektywność funkcjonowania gabinetu stomatologicznego.

Jeśli chodzi o bezbolesne procedury, liczy się wszystko, począwszy od niepozornej igły.

ZAANGAŻOWANIE FIRMY SEPTODONT W WYSOKĄ JAKOŚĆ IGIEŁ



- Jedna filia w 100% poświęcona igłom stomatologicznym
- 200 milionów igieł produkowanych każdego roku
- Silny nacisk na badania i rozwój w dziedzinie igieł stomatologicznych
- Wysoka jakość materiałów i procesów obróbki
- Ponad 20 lat ciągłego doskonalenia

* Septodont jest jedyną firmą produkującą ponad 500 milionów ampułek stomatologicznych leków znieczulających rocznie
Igły Septoject są wyrobami medycznymi klasy IIa – CE 0459

PEŁNA GAMA WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW DO INIEKCJI

- **Najwyższym priorytetem** pacjenta podczas wizyty u dentysty jest otrzymanie **bezbolesnego zastrzyku**, poprzedzone oczywiście znalezieniem lekarza, który dba o to **by nie sprawiać bólu** w czasie zabiegu⁽¹⁾.
- W aspekcie minimalizacji bólu w gabinecie stomatologicznym można polegać na **bezprecedensowym doświadczeniu** Septodont.

KARPULE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ ASPIRACJI

Kontrola, komfort i jakość

to pewność wykonywania lepszych iniekcji

- Mały lub standardowy uchwyt
- Lekkie
- Kompaktowe
- Jednoczęściowe
- Wykonane ze stali nierdzewnej



Mała

Standardowa

BEZPIECZNA STRZYKAWKA ULTRA SAFETY PLUS TWIST

Zranienie igłą stanowi poważne ryzyko dla Ciebie i Twojej praktyki, dlatego to rozwiązanie:

- Chroni Ciebie i Twój personel przed zranieniem lub zakłuciem igłą
- Dostępne jest ze sterylnym uchwytem jednorazowego użytku lub sterylizowalnym uchwytem wielokrotnego użytku
- Umożliwia aspirację pasywną i aktywną



1. Wprowadź nacięcia uchwytu w wycięcia cylindra



2. Przekręć uchwyt, aby go zablokować



(1) Jennifer de St. Georges – Dentistry Today 23(8): 96-99. August 2004.

